

Dubliersilikon transparent

Duplicating silicone transparent

Produktinformation

Product information



Allgemeine Produktinformationen

Additionsvernetzendes Gießsilikon zur Herstellung von Negativformen zur Produktion von Otoplastiken sowie für Kontrollformen.

Dubliersilikon, transparent wird vor allem eingesetzt bei der Verarbeitung von Lichtpolymerisaten bzw. zur Herstellung von Kontrollformen.

Endhärte ca. 19–21 Shore.


Liefereinheiten Dubliersilikon, transparent

2 x 1 Liter	REF 41000
2 x 5 Liter	REF 41001
8 x Doppelkartuschen	REF 41003

Produktinformation

Haltbarkeit / Charge: Siehe Gebinde bzw. Kartusche

Lagerung: Schützen gegen: Frost, Hitze, UV-Einstrahlung / Sonnenlicht. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

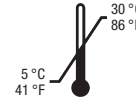

Hinweise

Komponente A – Katalysator

Komponente B – Basis

- Komponenten A und B vor dem Anmischen nicht in Kontakt bringen.
- Gebinde nach manuellem Gebrauch wieder gut verschließen.
- Der direkte Kontakt mit dem flüssigen Material ist zu vermeiden! Vor der Verarbeitung des Materials sollten die Hände durch das Tragen geeigneter Handschuhe geschützt werden.
- Vernetzte Materialien sind chemisch beständig – Flecken auf der Kleidung vermeiden.

Verarbeitungshinweise

Vor der Verarbeitung muss das Material eine Temperatur von $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ bei relativer Luftfeuchtigkeit von $50\% \pm 5\%$ besitzen.

Verarbeitungszeit: 4–6 Minuten

Aushärtung ohne Drucktopf: 15–30 Minuten

Aushärtung mit Drucktopf: 10–15 Minuten bei 40 °C und 2–5 bar

Geringere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Abbindezeiten.

General product information

Addition-vulcanizing casting silicone for manufacturing negative molds in the production of earmolds and for the control molds.

Duplicating silicone, transparent is used primarily for processing UV-polymerizates or for producing control molds.

Final degree of hardness approx. 19–21 shore.


Delivery units Duplicating silicone, transparent

2 x 1 liter	REF 41000
2 x 5 liter	REF 41001
8 x double cartridges	REF 41003

Product information

Stability / Batch: See tub / cartridge

Storage: Protect against: frost, heat, UV-radiation / sunlight. Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

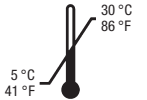

Indications

Component A – catalyst

Component B – base

- Avoid any contact between the components A and B before mixing them.
- Close the receptacle tightly after manual use.
- Avoid direct skin contact with the liquid material! Before handling the material protect your hands by wearing suitable gloves.
- Cross-linked materials are chemically resistant – avoid stains on your clothes.

Notes for processing

Before processing the material it must have reached a temperature of $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($73.4\text{ °C} \pm 35.6\text{ °F}$) at a relative air humidity of $50\% \pm 5\%$.

Processing time: 4–6 minutes

Curing time without pressure pot: 15–30 minutes

Curing time with pressure pot: 10–15 minutes at 40 °C (104 °F) and 2–5 bar

Lower temperatures prolong and higher temperatures reduce time of processing and curing.

Verarbeitungsanleitung

Manuelles Anmischen

Komponenten A und B gleichmäßig im Mischungsverhältnis 1:1 vermischen bis einheitliche Farbe entsteht. Für eine Negativform wird ca. 40 – 50 g Dubliersilikon benötigt.

Automatisches Anmischen

Die Verarbeitung kann mit dem Silikonmischgerät SIDOMIX II (REF 54561) oder mit der Inject-Pistole (REF 25100) durchgeführt werden. Die Komponenten werden im Verhältnis 1:1 blasenfrei gemischt. Mischkanüle (REF 25151 ff oder REF 61402 ff) mit ausgehärtetem Material nicht mehr verwenden.


Befüllung

Achten Sie bei der Befüllung der Einbettform darauf, dass die Spitze der Mischkanüle im Material verbleibt, somit verhindern Sie Blasen.


Aushärtung

Anschließend kann das Material bei Raumtemperatur ausgehärtet werden oder Sie stellen die befüllte Einbettform für eine blasenfreie Aushärtung für 10 – 15 Minuten bei 2 – 5 bar in den Drucktopf (REF 54200/49800). Nach der Aushärtung des Dubliersilikons entnehmen Sie den Abdruck vorsichtig mit der Ausbettsonde (REF 46700). Vor der Weiterverarbeitung die Negativform auf Wachsreste kontrollieren und diese entfernen.


Manuelles Anmischen Manual mixing

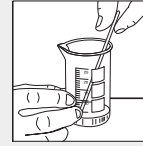


Automatisches Anmischen Automatic mixing

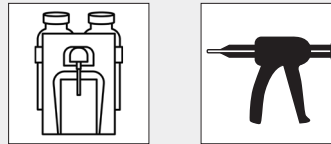

Befüllung Filling

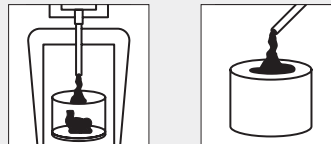

Aushärtung Polymerization

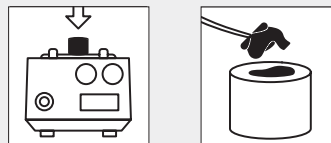

Processing

Manual mixing

Mix the two components A and B (mixing ratio 1:1) until material has homogeneous color. Approx. 40 – 50 g of duplicating silicone is needed for one negative mold.

Automatic mixing

The material can be processed with the silicone-mixing device SIDOMIX II (REF 54561) or with an inject pistol (REF 25100). Mix the components A and B bubble-free in the mixing canula (mixing ratio 1:1). Do not use mixing canula (REF 25151 ff or REF 61402 ff) if it contains hardened material.

Filling

When filling the material into the investment mold make sure that the tip of the mixing canula always stays in the material to avoid the formation of bubbles.

Polymerization

Afterwards let the material cure at room temperature or put the filled investment mold in the pressure pot (REF 54200/49800) for 10 – 15 minutes at 2 – 5 bar for a bubble-free polymerization. After the polymerization of the duplicating silicone, use the impression removing instrument (REF 46700) to carefully demold the impression. Before continuing with processing the impression, check the negative mold for wax remainders and remove them.



Bitte Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt beachten.

7908609_2022_05



Please follow the product information and the material safety data sheet.